

Indications

> Chronic weak ankles, moderate to severe ankle sprains, immobilization following other ankle/foot injuries, preventative measure to assist in reducing frequency and severity of ankle injuries

Contraindications

> Fractures, open wounds

Cleaning Instructions/Maintenance

> The Mach8™ Ankle Brace is machine washable using a mild detergent and warm water.
 > To prevent the hook and loop straps from damaging other items in the wash, place the Mach8™ Ankle Brace in the included mesh bag before washing or wash separately.
 > Remove promptly and allow to air dry only.

Instructions for use

1. The Mach8 Ankle Brace is designed to be worn over athletic socks. Place your foot inside the Mach8 Ankle Brace and straighten and adjust the tongue for proper alignment. Ensure that all laces are on top of the tongue padding. Ensure your heel is positioned in the hole in the bottom rear of the brace. Feed the laces through the remaining eyelets and tighten to your preferred level of comfort and support. Tie the laces snugly.
2. Wrap the lateral (outside) strap across the top of the foot, under the heel, and back around to the lateral side. Pull up and secure the strap at your level of comfort and support with the hook & loop fastener on the lateral side of the brace.
3. Wrap the medial (inside) strap across the top of the foot and over the lateral strap, under the heel, and back around to the medial side. Pull up and secure the strap at your level of comfort and support with the hook & loop fastener on the medial side of the brace.
4. Grab one end of the top strap in each hand. One end of the top strap will have a red Thrive logo; this side is the "attaching end". One end of the top strap will not have a logo; this is the "receiving end".
5. Pull the "receiving end" strap (without the red Thrive logo) across the middle of the brace and over the exposed laces to your level of comfort and support.
6. Pull the "attaching end" strap (with the red Thrive logo) across the middle of the brace and over the "receiving end strap" to your level of comfort and support. Attach by firmly pressing the "attaching end" strap onto the "receiving end" strap. You are now ready to go!

Caution

Please always follow these instructions for use. In case of pain or swelling, discontinue use and consult your medical provider immediately. This device is designed to assist recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with a healthcare professional. Thrive Orthopedics does not assume any responsibility for misuse of the product. It is advisable to wear socks with the Mach8™ Ankle Brace. Do not drive a vehicle while you are wearing this device. Use extreme caution when walking on all surfaces when using this device. Walk more slowly than normal. This device is for single-patient use only.

To the patient/user: This device has been designed and manufactured by Thrive Orthopedics to be state of the art for treatment of a specific medical condition. Should any serious incident occur in relation to this device it should be reported to the manufacturer at the contact information listed on this document and the proper authority of the country or state where you are located. When treatment is complete, dispose of this device according to local laws and ordinances.



Manufactured for:
 Thrive Orthopedics LLC
 387 Ridge Point Drive
 Carmel, IN 46032
www.thriveorthopedics.com

EC REP

Code of Practice AB
 Brunnsgatan 48,
 553 13 Jönköping


Made in China



Mach8-IFU-22_Rev1022

Mach8™ Ankle Brace

Instructions For Use

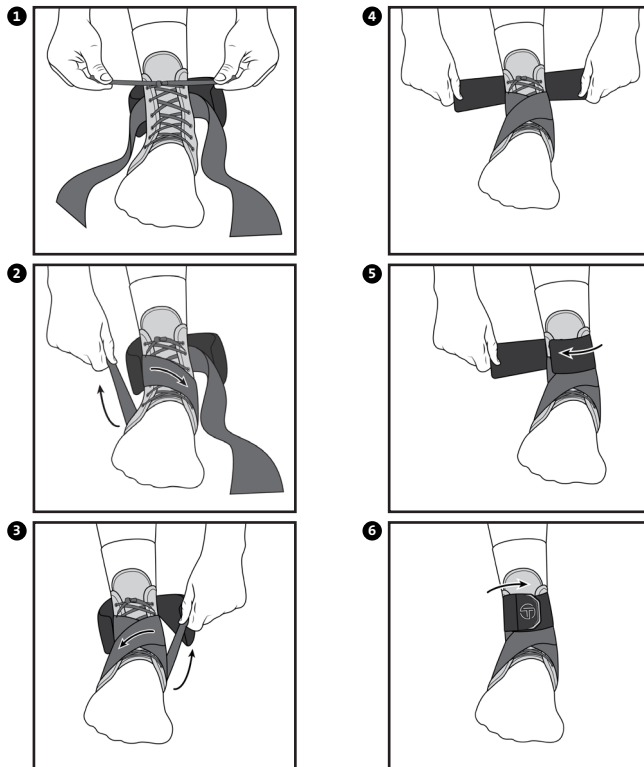

Indicaciones

- > Debilidad crónica en los tobillos, esguinces de tobillo de moderados a graves, inmovilización después de otras lesiones de tobillo o de pie, medida preventiva para ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de las lesiones de tobillo

Contraindicaciones

- > Fracturas, heridas abiertas

Instrucciones de limpieza/mantenimiento

- > La Mach8™ Ankle Brace se puede lavar a máquina con un detergente suave y agua tibia.
- > Para evitar que las correas de velcro dañen otras prendas durante el lavado, coloque la Mach8™ Ankle Brace en la bolsa de malla incluida antes de lavarla o lávela por separado.
- > Retirar rápidamente y dejar secar únicamente al aire libre.

Instrucciones de uso

1. La Mach8 Ankle Brace está diseñada para usarse sobre calcetines deportivos. Coloque el pie dentro de la Mach8 Ankle Brace y enderece y ajuste la lengüeta para una alineación adecuada. Asegúrese de que todos los cordones estén encima de la almohadilla de la lengüeta. Asegúrese de que el talón esté colocado en el orificio en la parte inferior trasera de la tobillera. Pase los cordones por los ojales restantes y ajústelos a su nivel preferido de comodidad y de soporte. Ajuste bien los cordones.
2. Pase la correa lateral (exterior) por encima del pie y por debajo del talón hasta llegar de nuevo al lado exterior. Tire hacia arriba y asegure la correa a su nivel de comodidad y de soporte con el cierre de velcro en el lado exterior de la tobillera.
3. Pase la correa medial (interior) por encima del pie y de la correa lateral, y por debajo del talón hasta llegar de nuevo al lado interior. Tire hacia arriba y asegure la correa a su nivel de comodidad y de soporte con el cierre de velcro en el lado interior de la tobillera.
4. Tome un extremo de la correa superior en cada mano. Un extremo de la correa superior tendrá un logotipo rojo de Thrive; este lado es el "extremo de bucle". Un extremo de la correa superior no tendrá un logotipo; este lado es el "extremo de gancho".
5. Tire de la correa del "extremo de gancho" (sin el logotipo rojo de Thrive) por el medio de la tobillera y por encima de los cordones expuestos a su nivel de comodidad y de soporte.
6. Tire de la correa del "extremo de bucle" (con el logotipo rojo de Thrive) por el medio de la tobillera y por encima de la "correa del extremo de gancho" a su nivel de comodidad y de soporte. Fije presionando, firmemente, la correa del "extremo de bucle" sobre la correa del "extremo de gancho". ¡Ya está listo!

Precaución

Siga siempre estas instrucciones de uso. En caso de dolor o hinchazón, deje de usarlo y consulte a su proveedor médico de inmediato. Este dispositivo está diseñado para ayudar en la recuperación y debe usarse exclusivamente según las instrucciones de un profesional de la salud, luego de una consulta. Thrive Orthopedics no asume ninguna responsabilidad por el mal uso del producto. Se recomienda usar calcetines con la Mach8™ Ankle Brace. No conduzca mientras esté usando este dispositivo. Tenga mucho cuidado al caminar sobre todas las superficies cuando utilice este dispositivo. Camine más despacio de lo normal. Este dispositivo es para uso de un solo paciente.

Para el paciente/usuario: este dispositivo ha sido diseñado y fabricado por Thrive Orthopedics con el fin de otorgar la calidad más avanzada en el tratamiento de una afección médica específica. Si ocurriera algún incidente grave en relación con este dispositivo, se deberá informar al fabricante mediante los datos de contacto que figuran en este documento y a la autoridad correspondiente del país o el estado donde se encuentra. Una vez finalizado el tratamiento, deseche este dispositivo de acuerdo con las leyes y las ordenanzas locales.

Indications

- > Cheilles fragiles chroniques, entorses de la cheville de modérées à graves, immobilisation suite à d'autres blessures de la cheville ou du pied, mesure préventive pour aider à réduire la fréquence et la gravité des blessures de la cheville.

Contre-indications

- > Fractures, plaies ouvertes

Instructions de nettoyage et entretien

- > L'Atelle pour cheville Mach8™ est lavable à la machine avec un détergent doux et de l'eau tiède.
- > Pour éviter que les sangles crochet et boucle n'endommagent d'autres articles lors du lavage, placez l'atelle pour cheville Mach8™ dans le sac en filet inclus avant le lavage ou lavez-la séparément.
- > Retirez-la rapidement et laissez-la sécher à l'air libre uniquement.

Mode d'emploi

1. L'atelle pour cheville Mach8 est conçue pour être portée au-dessus des chaussettes de sport. Placez votre pied à l'intérieur de l'atelle pour cheville Mach8 puis redressez et ajustez la languette pour un alignement correct. Assurez-vous que tous les lacets sont au-dessus du rembourrage de la languette. Assurez-vous que votre talon est positionné dans le trou situé dans la partie inférieure arrière de l'atelle. Faites passer les lacets dans les œillets restants et serrez-les jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de confort et de soutien souhaitez. Attachez les lacets de façon confortable.
2. Enroulez la sangle latérale (extérieure) sur le dessus du pied, sous le talon et retournez vers le côté latéral. Tirez vers le haut et fixez la sangle à votre niveau de confort et de soutien à l'aide de la fermeture à boucles et crochets située sur le côté latéral de l'atelle.
3. Enroulez la sangle médiane (intérieure) sur le dessus du pied et par-dessus la sangle latérale, sous le talon, puis revenez sur le côté médian. Tirez vers le haut et fixez la sangle selon votre niveau de confort et de soutien avec la fermeture à crochet et boucle sur le côté médial de l'atelle.
4. Saisissez une extrémité de la sangle supérieure dans chaque main. Une extrémité de la sangle supérieure aura un logo Thrive rouge; ce côté est l'attache. Une extrémité de la sangle supérieure n'aura pas de logo; il s'agit de la partie qui reçoit l'attache.
5. Tirez la sangle de la partie réceptrice (celle sans le logo rouge Thrive) au milieu de l'atelle et sur les lacets exposés selon votre niveau de confort et de soutien.
6. Tirez l'attache de la sangle (avec le logo rouge Thrive) au milieu de l'atelle et par-dessus la sangle qui reçoit l'attache selon votre niveau de confort et de soutien. Attachez en appuyant fermement sur l'attache de la sangle dans la partie réceptrice ». Vous êtes maintenant prêt à partir!

Mise en garde

Veuillez toujours suivre les présentes instructions d'utilisation. En cas de douleur ou d'enflure, cessez l'utilisation et consultez immédiatement votre médecin. Cet appareil est conçu pour aider à la récupération et doit être utilisé exclusivement sous les instructions d'un professionnel de la santé et en consultation avec celui-ci. Thrive Orthopedics n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. Il est conseillé de porter des chaussettes avec la chevillière Mach8™. Ne conduisez pas de véhicule pendant que vous portez cet appareil. Soyez extrêmement prudent lorsque vous marchez sur toutes les surfaces lorsque vous utilisez cet appareil. Marchez plus lentement que d'habitude. Cet appareil est destiné à un usage par un seul patient.

Pour le patient ou l'utilisateur : Cet appareil à la fine pointe de la technologie a été conçu et fabriqué par Thrive Orthopedics pour le traitement d'une condition médicale spécifique. Si un incident grave survient relativement à cet appareil, il doit être signalé au fabricant aux coordonnées indiquées dans ce document et aux autorités compétentes du pays ou de l'État où vous vous trouvez. Une fois le traitement terminé, jetez cet appareil conformément aux lois et aux ordonnances locales.