

Overlay pump maintenance instructions

Proceed only if the Overlay is losing pressure


Instruction video



[Click here](#)

1 Read maintenance precautions below

- ⚠ Do not press the integrated pump or valve while the Overlay is submerged in water.
- ⚠ Only isopropyl alcohol should be used. At least 70% alcohol, also known as rubbing alcohol, available in most pharmacies.
- ⚠ When using alcohol, submerge only the tip of the integrated pump (the part with the hole).

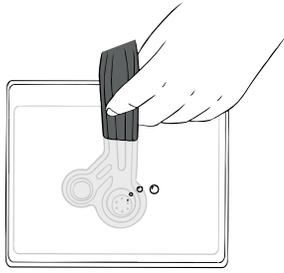


- 2 Inflate the Overlay fully. Then submerge the pump in water and observe carefully.

If no air bubbles come from the pump after 1 minute, or if bubbles appear elsewhere on the product, please contact us at: clinics@ethnocare.ca




- 3 Remove the Overlay from water and deflate it completely.

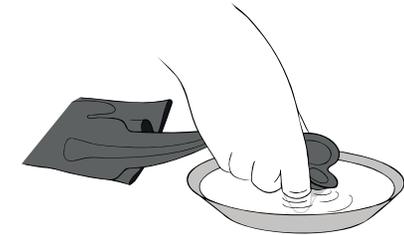


- 4 Submerge only the tip of the pump (the part with the hole) into isopropyl alcohol.


Then pump a small amount of alcohol into the Overlay.

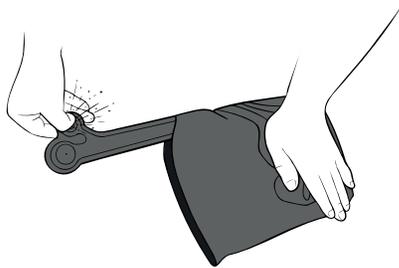

- 5 Release the excess alcohol by pressing on the valve

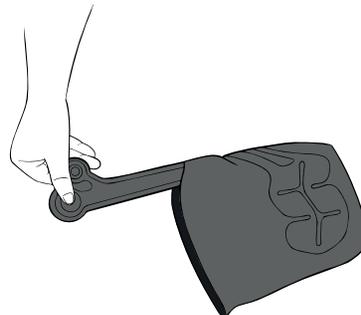

- 6 Inflate the Overlay using the integrated pump.

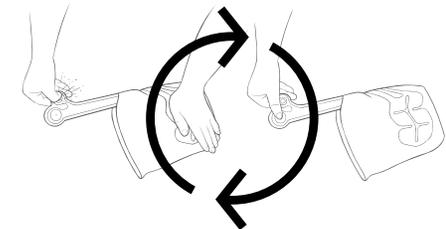

- 7 Repeat steps 5 and 6 a few times to remove all remaining alcohol from inside the bladders.

For Overlay TT and TF

ETHNOCARE

Instructions de maintenance de la pompe

À effectuer uniquement si l'Overlay perd de la pression


Vidéo explicative



[Cliquer ici](#)


① Voir les précautions d'entretien ci-dessous

- ❗ **Ne pas appuyer sur la pompe intégrée ou la valve lorsque l'Overlay est immergé dans l'eau.**
- ❗ Seul de l'alcool isopropylique doit être utilisé. Utiliser de l'alcool à au moins 70 %, également appelé alcool à friction, que l'on trouve dans la plupart des pharmacies
- ❗ Lors de l'utilisation de l'alcool, immerger uniquement l'extrémité de la pompe intégrée (la partie avec le trou).

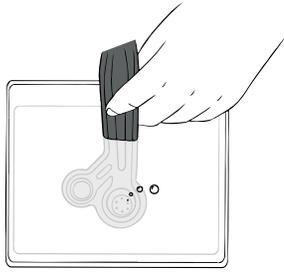

- ② Gonfler l'Overlay. Ensuite, plonger la pompe dans l'eau et observer attentivement.


Si aucune bulle d'air ne sort de la pompe après 1 minute, ou si des bulles apparaissent à un autre endroit, veuillez nous contacter à: clinics@ethnocare.ca

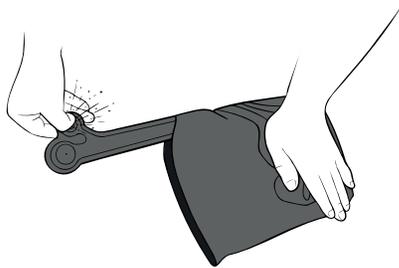


- ⑤ Évacuer l'alcool en trop en appuyant sur la valve.



- ③ Retirer l'Overlay de l'eau et dégonfler-le complètement.

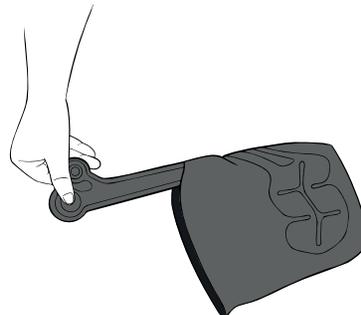


- ⑥ Gonfler l'Overlay à l'aide de la pompe intégrée.

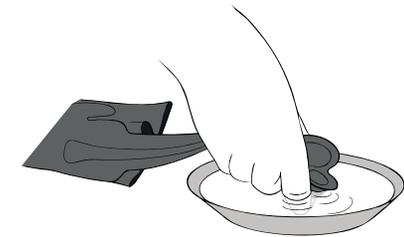

- ④ Immerger uniquement l'extrémité de la pompe (la partie avec le trou) dans de l'alcool isopropylique.

Ensuite, pomper une petite quantité d'alcool à l'intérieur de l'Overlay.

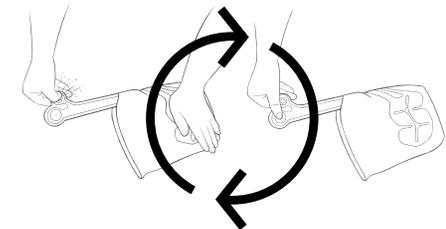

- ⑦ Répéter les étapes 5 et 6 plusieurs fois pour évacuer l'alcool restant des cellules.

Pour l'Overlay TT et TF

ETHNOCARE